

Enregistrement

Préconisation pour prélèvement ou auto-prélèvement anal, pharyngé ou vaginal - Recherche de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae

LES INDICATIONS SUIVANTES SONT A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT POUR EVITER TOUTE SOUILLURE SUSCEPTIBLE DE GENERER L'INTERPRETATION

Intérêt : Diagnostic d'infection à Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae.

Matériel nécessaire


- Kit avec écouvillon, multitest en milieu Aptima, fourni par le laboratoire

Préconisations avant le prélèvement

- Se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement.


Préconisations pour le prélèvement

- Ouvrez partiellement le sachet contenant l'écouvillon.
- Ne touchez pas le coton et ne le laissez pas tomber. Si le coton est touché ou si l'écouvillon est tombé, demandez un nouveau kit de prélèvement.
- Enlevez l'écouvillon du sachet. Tenez l'écouvillon en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige (cf. Fig. 1).

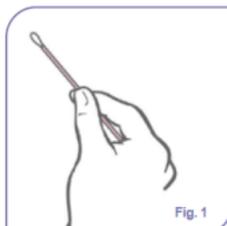

Pour un prélèvement vaginal

- Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance d'environ 3 cm (cf. Fig. 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.

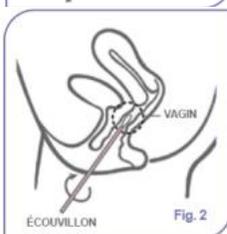

Pour un prélèvement rectal

- Insérez délicatement l'écouvillon dans le rectum à environ 3 à 5 cm de profondeur et faites doucement tourner l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes.



Pour un prélèvement pharyngé

- Insérez délicatement l'écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec les amygdales et le fond de la gorge, puis retirez l'écouvillon sans toucher l'intérieur des joues, ni de la langue.

Enregistrement

Préconisation pour prélèvement ou auto-prélèvement anal, pharyngé ou vaginal - Recherche de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae

- Retirez l'écouvillon sans toucher la peau. Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube.
- Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
- Placez immédiatement l'écouvillon dans le milieu de transport de façon à ce que le bout de l'écouvillon soit visible en dessous de l'étiquette.

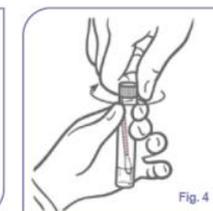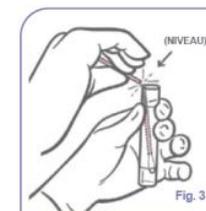

- Cassez précautionneusement la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord du tube (cf. Fig. 3).
- Resserrez fermement le bouchon sur le tube (cf. Fig. 4).
- Conservez le tube à température ambiante et rapportez-le à votre laboratoire dans les meilleurs délais n'excédant pas les 48h.

- **Identifier le tube** avec votre Nom et Prénom, Date de naissance.
- **Placer le tube identifié dans le sachet double poche.**

Date : _____	NOM : _____
Heure du prélèvement : _____	Prénom : _____
Heure de dépôt : _____	Date de naissance : _____
	Auto-Prélèvement apporté au laboratoire <input type="checkbox"/>
	Auto-Prélèvement recueilli au laboratoire <input type="checkbox"/>
	Auto-Prélèvement recueilli en établissement de soins <input type="checkbox"/>
Renseignements cliniques	<u>Contexte clinique</u> : _____